

ZAC DE LA PENTECÔTE
15, RUE LÉON GAUMONT
44700 ORVAULT - FRANCE

contact@damie.com

TÉL. : 02.51.77.81.30
FAX : 02.51.77.81.31


WWW.DAMIE.COM



ECG D'ÉPREUVE D'EFFORT

Rapide, précis et ergonomique


Transmission ECG via USB ou Bluetooth
Logiciel paramétrable
Détection automatique d'arythmie en option

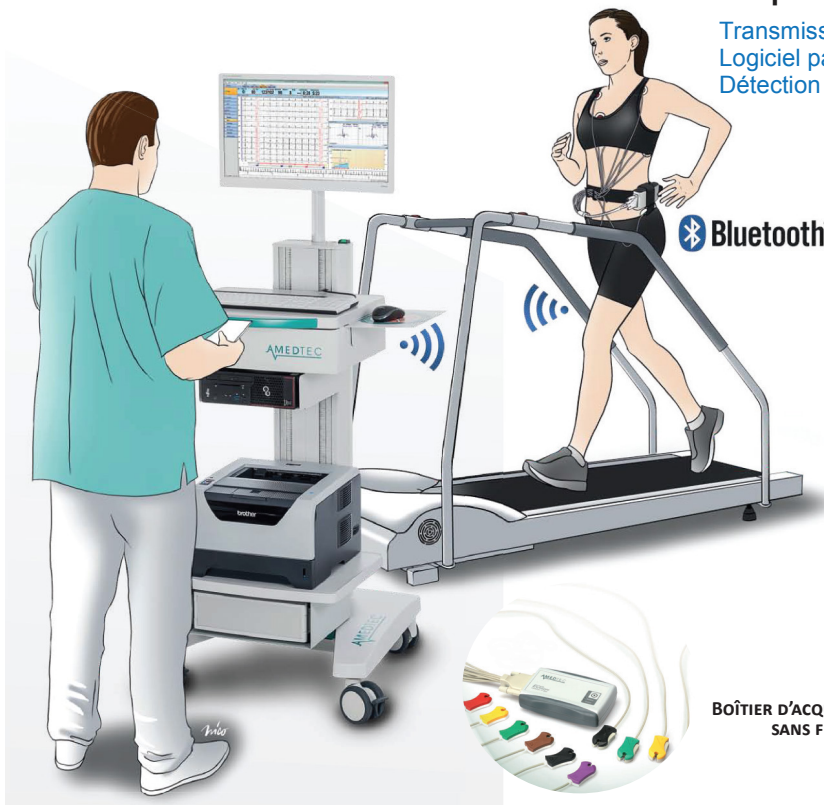

BOÎTIER D'ACQUISITION
SANS FIL

PROGRAMME D'ÉPREUVE D'EFFORT

AMEDTEC ECG^{pro} est livré avec le programme d'épreuve d'effort avec des paramètres prédéfinis. Si, toutefois, aucun des paramètres prééglés ne devait correspondre à vos souhaits, vous pouvez créer facilement des profils avec un simple clic.

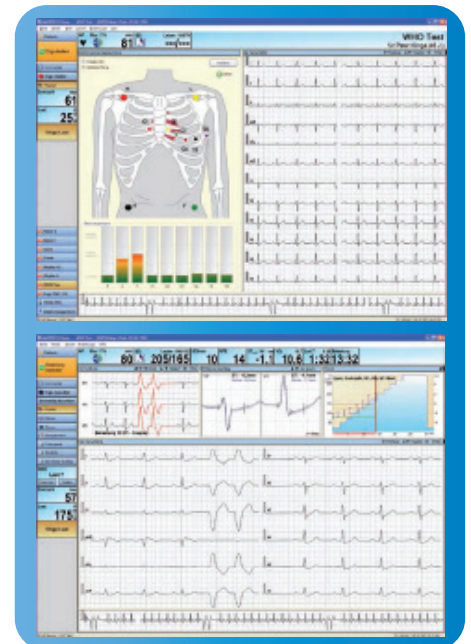

PROCÉDURE DE TEST ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES

Des protocoles standardisés et programmable permettent à la fois une routine et des exercices adaptés individuellement. Selon le protocole, à des moments prédéfinis la pression artérielle est mesurée automatiquement et les bandes ECG sont imprimées ou marquées pour le rapport. A tout moment, vous pouvez intervenir sur l'épreuve d'effort, par simple clic, vous pouvez imprimer des bandes ECG, des moyennés ou un tracé compacté de l'ECG. AMEDTEC ECG^{pro} contrôle les ergomètres, les tapis et les appareils de pression artérielle. Les dispositifs peuvent être contrôlés également manuellement à tout moment.

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE L'ARYTHMIE

Les événements arythmiques sont détectés immédiatement, car ils se produisent au cours de l'exercice, et sont affichés en rouge dans une zone séparée de l'écran.

BATTEMENTS MOYENNÉS

AMEDTEC ECG^{pro} affiche les moyennés sur les 12 dérivations. L'élévation et les dépressions du niveau de ST sont affichés dans une fenêtre séparée.

