



DAMIE

DISTRIBUTION D'APPAREILS MÉDICAUX INFORMATIQUES ÉLECTRONIQUES

AMEDTEC ECG^{pro}

ECG DE REPOS

L'ECG de repos à 12 dérivations avec un flux de travail optimal



DISPOSITIF D'ACQUISITION

Vous avez le choix entre une connexion USB et la transmission sans fil Bluetooth. Bluetooth permet une mobilité maximale, utile par exemple pour les enregistrements rythmiques plus longs.

GUIDE D'UTILISATEUR CONFORTABLE PAR OPÉRATION À UNE TOUCHE
Ne pensez plus à la prochaine opération nécessaire AMEDTEC ECG pro vous guide.

INDICATEUR DE QUALITÉ

Le graphique à barres montre la qualité de chaque application d'électrodes dans les dégradés de couleur vert à rouge. Simultanément, vous pouvez observer l'ECG.

En cas d'ECG défectueux, vous pouvez immédiatement identifier les électrodes défectueuses à l'aide du graphique. En outre, vous pouvez également utiliser la mesure d'impédance traditionnelle.

PROGRAMMES D'EXAMEN

AMEDTEC ECGpro est livré avec des programmes adaptés à presque tous les examens ECG. Mais vous pouvez facilement créer le vôtre. Chaque programme peut être démarré en un seul clic.


TRANSMISSION ECG SANS FIL VIA BLUETOOTH
ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE L'ECG DE REPOS ET DE RYTHME
INTERPRÉTATION ECG PAR LE PROGRAMME HES®



DAMIE

DISTRIBUTION D'APPAREILS MÉDICAUX INFORMATIQUES ÉLECTRONIQUES

AMEDTEC ECG^{pro}

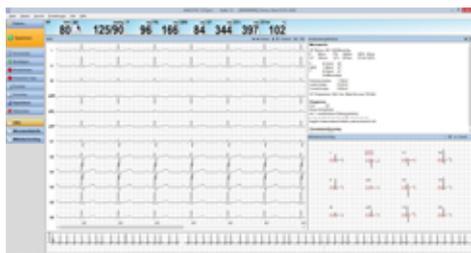

COMPARAISON DES ENREGISTREMENTS

L'enregistrement actuel de l'ECG du patient peut être comparé à tous les autres ECG pris. Vous pouvez ouvrir plusieurs d'ECG de comparaison pour le même patient à la fois.

BATTEMENTS MOYENNÉS

AMEDTEC ECGpro affiche les moyennés sur les 12 dérivations. L'élévation et les dépressions du niveau de ST sont affichés dans une fenêtre séparée.

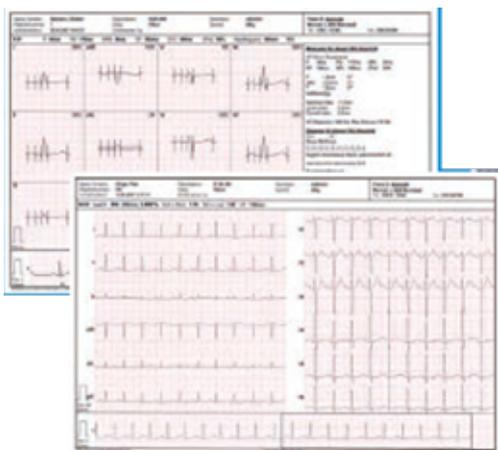


TABLEAU DE MESURE


AMEDTEC ECGpro vous fournit toutes les valeurs de mesure en un coup d'œil.

GESTION DES DONNÉES MÉDICALES


HAUT NIVEAU DE SECURITE

Bénéficiez de l'efficacité de la gestion de vos données médicales et professionnelles. AMEDTEC ECGpro prend en compte la sensibilité du diagnostic médical. Microsoft SQL Server fournit une plate-forme avancée et solide pour stocker et enregistrer des données. Le stockage des données sur un serveur central garantit la sécurité des données et des informations disponibles. Les périphériques qui fonctionnent hors connexion se synchronisent automatiquement en répliquant les données dès qu'une connexion réseau est détectée.

Les paramètres spécifiques à l'utilisateur et l'attribution de privilèges ou de données de connexion protègent le système contre les accès non autorisés.

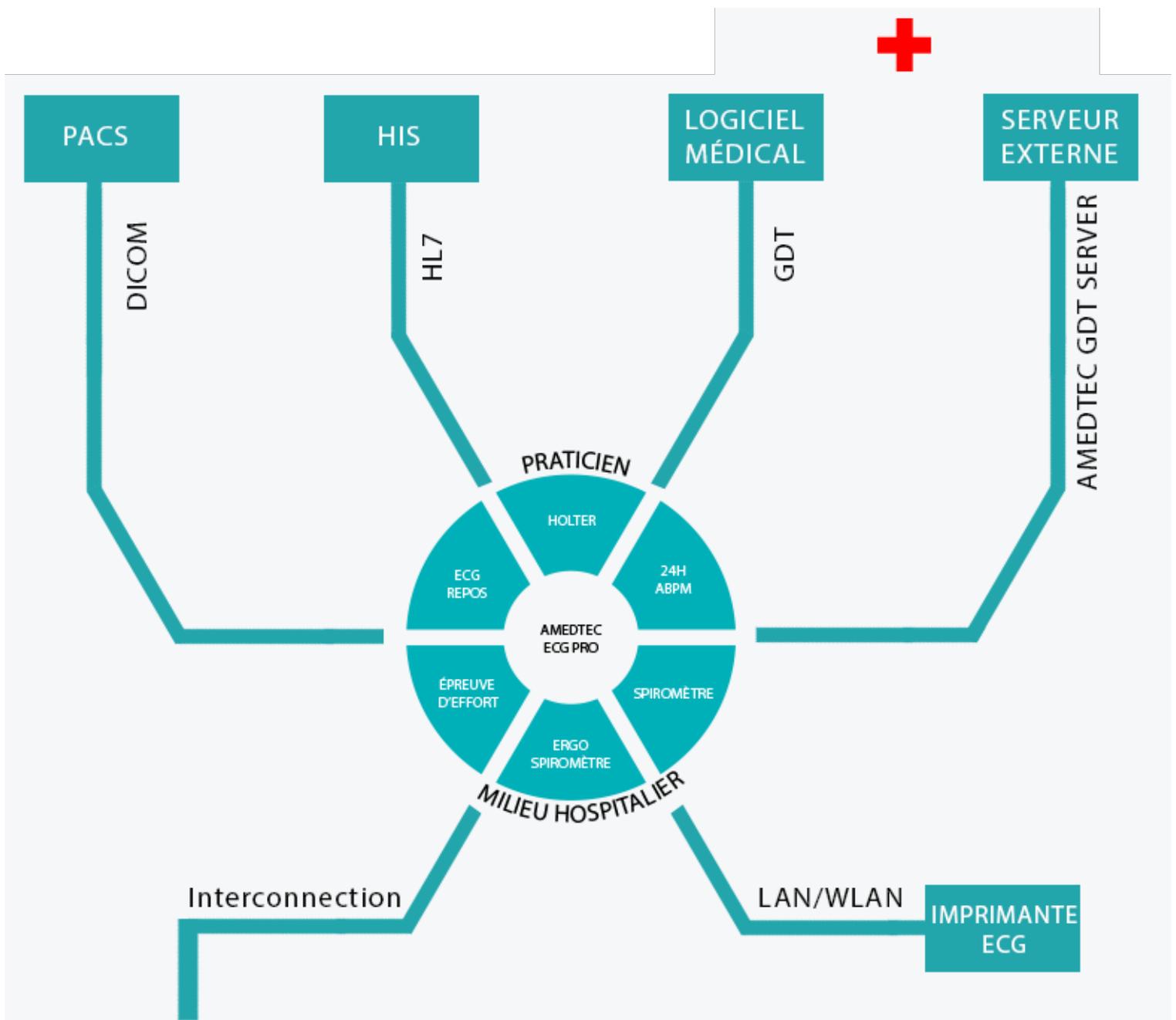

INTERNET

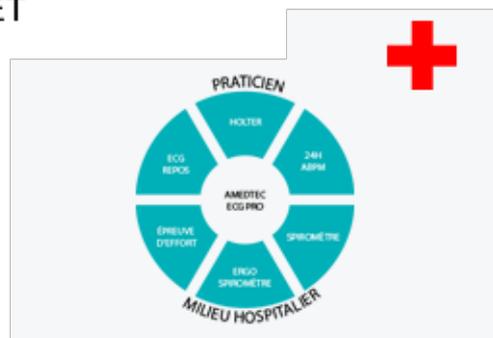

CENTRE ÉVALUATION



DAMIE

DISTRIBUTION D'APPAREILS MÉDICAUX INFORMATIQUES ÉLECTRONIQUES

UNE INTÉGRATION FLEXIBLE

L'efficacité économique appelle des solutions durables. AMEDTEC ECGpro assure la communication via les interfaces HL7, DICOM et GDT. Le système de gestion des données est conçu de manière à s'intégrer facilement aux systèmes HIS, d'image, d'archivage et de communication (PACS) existants ou aux environnements logiciels de pratique. Le serveur AMEDTEC GDT gère et transfère les données provenant de systèmes externes. Les données des appareils ECG sélectionnés.

WORKFLOWS PLUS SIMPLES

Des analyses externes sans risque ?

Avec Interlink, AMEDTEC ECGpro assure la transmission rapide et sécurisée des données enregistrées ou des rapports de diagnostic via Internet.

Voir les courbes ECG pendant le test ?

AMEDTEC ECGpro Online transfère les ECG en cours à tous les postes de travail autorisés en temps réel.

GESTION DE FLUX

DES DIAGNOSTICS PLUS EFFICACES

AMEDTEC simplifie la complexité des tests cardiopulmonaires.

AMEDTEC ECGpro Workflow dirige toutes les informations pertinentes au bon endroit et au bon moment. Peu importe que vous travailliez dans un cabinet médical ou dans un hôpital, le système est bidirectionnel, fiable et, si nécessaire, complètement dématérialisé. Les demandes d'examen peuvent être créées directement dans le logiciel HIS, PACS ou d'entraînement. AMEDTEC ECGpro les accepte et les transmet au poste de travail ou à la plate-forme.

Parfaitement organisé

Lorsque le diagnostic est terminé, la réserve de travail est automatiquement mise à jour. Les résultats sont transmis immédiatement au logiciel HIS, PACS ou au logiciel d'entraînement. En quelques clics le médecin a les résultats du test sous forme électronique. AMEDTEC ECGpro prend en charge la facturation par cas et vous permet d'archiver vos données numériquement.